


NAVODILA ZA UPORABO AVTOINJEKTORJA EPIPEN**Spoštovani!**


Avtoinjektorji EpiPen so namenjeni takojšnji uporabi pri pacientih z znanim večjim tveganjem za anafilaksijo, vključno s posamezniki, ki so anafilaksijo že doživeli.

Otroka namestimo:


- v ležeči položaj, če je bled, slaboten, zmeden...,
- na bok, če bruha ali
- v sedeči položaj, če težko diha.

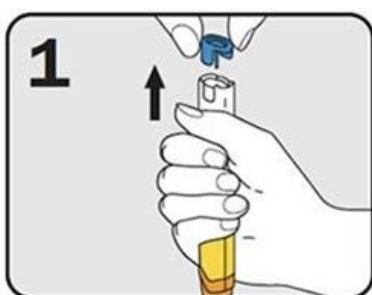

1. Avtoinjektor EpiPen primite z dominantno roko, s palcem najbližje modri varnostni zaporki. Z drugo roko odstranite modro varnostno zaporko.

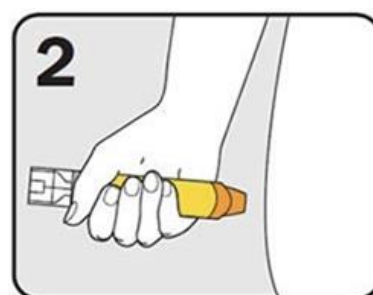

2. Avtoinjektor EpiPen držite v razdalji približno 10 cm od zunanje strani stegna. Oranžna konica mora biti obrnjena proti zunanji strani stegna.

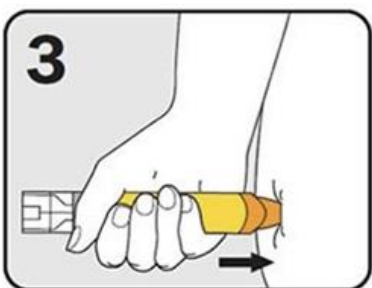

3. Trdno pritisnite EpiPen v zunanjo stran stegna, tako da je pod **pravim kotom (90°)**. Ko se naprava aktivira, zaslišite »klik«. Avtoinjektor EpiPen držite na mestu 5 sekund.



4. Avtoinjektor EpiPen odstranite z mesta injiciranja in mesto rahlo masirajte, da pospešite resorbcijo zdravila.

5. **Pokličite 112, prosite za prihod reševalnega vozila, in povejte, da gre za anafilaksijo.**
6. Če se simptomi ne izboljšajo, lahko po 5 – 15 minutah uporabite drug avtoinjektor EpiPen.

Otroški oddelek
Kataloška oznaka: POo-07
Oktober 2023, verzija 1